



МЫ СОЗДАЁМ
УЛЫБКИ,
КОТОРЫЕ ДАРЯТ
СЧАСТЬЕ



**КАТАЛОГ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ**

SM Light*/ РеЛайт

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНЫХ И БОКОВЫХ ЗУБОВ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Реставрация твёрдых тканей зуба (полости всех классов по Блэку)
- Восстановление культи зуба
- Шинирование
- Коррекция реставраций из композитов
- Изготовление не прямых реставраций (вкладки, накладки, виниры)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко полируется
- Не прилипает к инструменту
- Стабилен при моделировании
- Рентгеноконтрастен
- Флюоресцентен
- Широкий диапазон оттенков по шкале Vita Classical

3 ГРУППЫ СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТИ:		
ОТТЕНОК ПОВЫШЕННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ <i>TC (TRANSLUCENT CLEAR)</i>	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ЭМАЛЕВЫЕ) ОТТЕНКИ <i>BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2</i>	ДЕНТИН-ОПАКОВЫЕ ОТТЕНКИ <i>OA2, OA3</i>
Для моделирования режущего края и придания реставрации оптического «эффекта глубины»	Обладают усреднённой прозрачностью/опакостью между дентинными и эмалевыми оттенками	Маскировочные оттенки для придания большей насыщенности реставрации, предотвращения сквозного просвечивания

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ:

1. При эстетической реставрации передних и боковых зубов в большинстве клинических ситуаций достаточно использования только оттенков универсальной опакowości
2. Опаковые оттенки (OA2, OA3) следует применять при значительных дефектах дентина передних зубов, когда универсальных оттенков недостаточно для блокирования просвечивания тёмного фона полости рта и придания конечному цвету реставрации естественной теплоты
3. Для имитации цветовых эффектов и индивидуальных цветовых особенностей зубов эффективно применение композитных красителей РеЛайт колор/ SM Light color*

ФОРМА ВЫПУСКА:	• шприц (4 г)
-----------------------	---------------

SM Light tempo, tempo flow*/ РеЛайт темпо, темпо флоу

КОМПОЗИТ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Временная изоляция полостей при длительном эндодонтическом лечении
- Временная изоляция при микропротезировании
- Временная герметизация винта абатмента имплантата
- Блокирование поднутрений перед снятием оттиска
- Фиксация полимерной матрицы в межзубных промежутках при реставрации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономит время
- Удобен в работе
- Плотное краевое прилегание
- Выдерживает жевательную нагрузку
- Легко удаляется единой порцией, не требуя высверливания

SM Light tempo*/ РеЛайт темпо композит светового отверждения для временного пломбирования	SM Light tempo flow*/ РеЛайт темпо флоу текучий композит светового отверждения для временного пломбирования
	
наполненная бесцветная паста после отверждения	текучая бирюзовая паста после отверждения

ФОРМЫ ВЫПУСКА:	• паста в шприце (2,5 г) бесцветная или бирюзовая • текучая паста в шприце (2,5 г) бесцветная или бирюзовая, насадки сменные (5 шт.)
-----------------------	---

* Новые наименования стоматологических материалов.
Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Light color*/ РеЛайт колор

ОКРАШЕННАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАСТА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Имитация цветовых эффектов (меловые пятна, трещины эмали и т.д.) и тонирование композитной реставрации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индивидуализация особенностей зубов
- Естественность композитной реставрации
- Материал совместим со всеми светоотверждаемыми композитами и компомерами

Белый — имитация меловидных пятен при флюорозе, оптическое акцентирование бугорков и валиков эмали, маскировка пигментированных участков Коричневый — имитация сильнопигментированных трещин эмали и фиссур жевательной поверхности боковых зубов	Серый — придание фиссурам боковых зубов тёмного оттенка Охра — оптическое акцентирование пришеечной области передних зубов, имитация пигментации фиссур боковых зубов, тонирование дентина
--	---

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Глубина фотополимеризации до 0,2 мм
2. После нанесения и фотополимеризации следует перекрывать эмалевыми оттенками композитного материала

ФОРМА ВЫПУСКА:	• шприц (1 г), насадки сменные (5 шт.)
-----------------------	--

SM Light bond*/ РеЛайт бонд

АДГЕЗИВ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Прочное сцепление композита с тканями зуба, надёжное краевое прилегание

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкое проникновение в дентинные канальца
- Эластичность и плотное краевое прилегание
- Высокая адгезия к тканям зуба (27 МПа)
- Легкая адаптация первого слоя композита
- Может использоваться с любыми светоотверждаемыми композитами в технике тотального травления эмали и дентина

ФОРМА ВЫПУСКА:	• флакон (5 мл)
-----------------------	-----------------

SM Light жидкость для моделирования*/ РеЛайт жидкость для моделирования

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Предотвращение прилипания композитной пасты к рабочим инструментам и улучшение адаптации композита к тканям зуба при моделировке

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие прилипания к рабочему инструменту
- Комфортная работа с высоконаполненными композитами
- Максимально гладкий верхний слой реставрации
- Оптимальная вязкость
- Прозрачная после отверждения
- Не содержит растворителей и НЕМА
- Совместима со всеми светоотверждаемыми композитами

ФОРМА ВЫПУСКА:	• флакон (5 мл)
-----------------------	-----------------

* Новые наименования стоматологических материалов.
Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Seal Duo*/ Эпоксидин Дуо

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО ПОЛИМЕРА ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ



НО
ВИН
КА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

➤ Пломбирование корневых каналов постоянных зубов с применением гуттаперчевых и других внутриканальных штифтов, а также горячей гуттаперчи

ПРЕИМУЩЕСТВА:

➤ Превосходная текучесть обеспечивает заполнение корневого канала на всём его протяжении
➤ Отсутствие в составе материала уротро-

пина полностью исключает возникновение постпломбировочных болей
➤ Высокая адгезия обеспечивает максимальное краевое прилегание и герметичность, что гарантирует длительную службу корневой пломбы
➤ Биосовместимость материала исключает раздражающее воздействие на ткани периодонта
➤ Использование двойного шприца экономит время специалиста

- Превосходная текучесть: 28 мм
Требование ГОСТ*: не менее 20 мм
- Оптимальное время работы: 2–2,5 часа
- Высокая рентгеноконтрастность: 6 мм Al
Требование ГОСТ: не менее 3 мм Al
- Низкая растворимость: 0,1 %
Требование ГОСТ: не более 3 %

** ГОСТ 31071 — «Материалы стоматологические для пломбирования корневых каналов зубов»

- Толщина плёнки: 16 мкм
Требование ГОСТ: не более 50 мкм
- Высокая прочность сцепления с дентином при сдвиге: 10–12 МПа

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Пломбирование корневых каналов гуттаперчей с использованием пасты SM Seal Duo в качестве силера предусматривает применение «стандартных» методик obturации и не требует каких-либо дополнительных мероприятий

ФОРМА ВЫПУСКА: • двойной шприц (12 г), блокнот для замешивания

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА

Пациентка А., обратилась с жалобой на скол пломбы. При объективном осмотре в зубе 15 имеется кариозная полость на медиальной поверхности, заполнена размягчённым дентином, пломба частично сохранена на дистальной поверхности. Коронка в цвете изменена, перкуссия, зондирование, термометрия — отрицательны. ИРОПЗ около 80 %.

Диагноз: 15 — K04.5 Хронический апикальный периодонтит (апикальная гранулёма)

1 — исходная ситуация (на RVG тень пломбировочного материала в виде неравномерной структуры прослеживается на всем протяжении корневого канала зуба 15, периодонтальная щель расширена в апикальной части)

2 — после снятия остатков пломб, кариозного дентина и подготовки зуба к установке коффердама

3 — распломбировка корневого канала





4 — ирригация Жидкостью антисептической гипохлорит натрия 3 % (ТехноДент)

5 — внесение пасты Иодотин (ТехноДент) на основе йодоформа и гидроокиси кальция, временное пломбирование полости

6 — контроль RVG распломбировки корневого канала

7 — пломбирование канала методом латеральной компакции при помощи гуттаперчевых штифтов и пасты SM Seal Duo на основе эпоксидного полимера

8 — контрольное RVG 15 зуба, корневой канал распломбирован на 2/3 длины, подготовлен под штифтовую культевую вкладку для ортопедического восстановления зуба

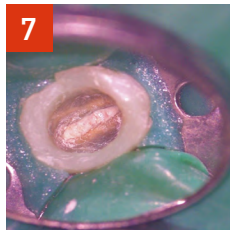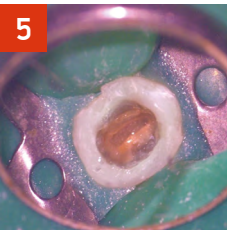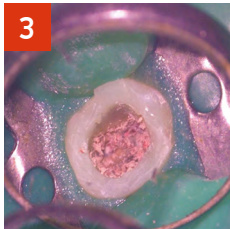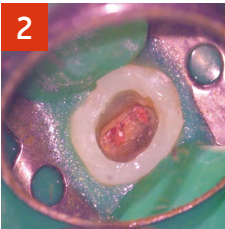

Благодарим за предоставленный материал Курмаз Марию Константиновну, врача-стоматолога-терапевта ООО «Семейная стоматология», г. Белгород

* Новые наименования стоматологических материалов.
Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Endo*/ Кальцетин Эндо

ПАСТА ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИДРООКИСИ КАЛЬЦИЯ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

➤ Необратимые формы пульпита
➤ Консервативное лечение всех форм хронических периодонтитов
➤ Алерсификация и алерсогенез

ПРЕИМУЩЕСТВА:

➤ Превосходный антибактериальный эффект (pH > 12)
➤ Создание условий для роста и формирования корня зуба
➤ При необходимости паста легко извлекается из каналов
➤ Шприц с усиленным поршнем, удобным захватом и системой Luer Lock
➤ Ультратонкие насадки

ФОРМЫ ВЫПУСКА: • шприц (2 г), насадки сменные (3 шт.)
• шприц (2 г), насадки сменные (20 шт.)

SM Fill*/ Эвгетин

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

➤ Пломбирование корневых каналов зубов при лечении пульпита и всех форм периодонтита, особенно в случаях пломбирования корневых каналов с морфологическими изменениями
➤ Материал рекомендуется в качестве силера для совместного применения с гуттаперчей

ПРЕИМУЩЕСТВА:

➤ Значительное снижение периапикальной чувствительности (содержит дексаметазон — 0,01 %, гидрокортизона ацетат — 1 %)
➤ Легко смешивается и остается пластичным в течение 5–6 часов
➤ Мощный антисептик длительного действия — тимол йодид
➤ Плотное заполнение каналов и микроканалцев (толщина плёнки 3–5 мкм)
➤ Низкая растворимость (0,15 %) гарантирует продолжительную службу корневой пломбы
➤ Высокая рентгеноконтрастность

ФОРМА ВЫПУСКА: • банка (14 г), флакон (10 мл), блокнот

SM MTA, SM MTA быстротвердеющий*/ Рутдент, Рутдент быстротвердеющий

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

➤ Пломбирование апикальной части канала с незавершённым формированием корня
➤ Ретроградное пломбирование канала при резекции верхушки корня зуба
➤ Закрытие перфораций корневого канала, а также в области би- и трифуркаций глубокой полости, при наружной резорбции корня зуба
➤ Лечебное покрытие пульпы для поддержания её витальности при лечении глубокого кариеса и всех обратимых форм пульпита
➤ Прямое покрытие пульпы после пульпотомии

ПРЕИМУЩЕСТВА:

➤ Твердеет в присутствии влаги, крови
➤ Контролируемое время отверждения
➤ Высокая механическая прочность
➤ Превосходная биосовместимость
➤ Низкая растворимость
➤ Высокая щёлочность (pH > 12) и микробцидность

Характеристики/ виды	SM MTA*/ Рутдент	SM MTA быстротвердеющий*/ Рутдент быстротвердеющий
Рабочее время	10–12 минут	2–4 минуты
Время твердения	4–24 часа	12–15 минут**
Прочность при сжатии, МПа	40±2	45±2
Растворимость, %	0,70	0,58
Значение pH	12,48	12,18

** Начальное время твердения

ФОРМЫ ВЫПУСКА: • порошок (20 доз по 0,3 г), флакон для дистиллированной воды, блокнот для замешивания
• порошок быстротвердеющий (20 доз по 0,3 г), флакон для дистиллированной воды, блокнот для замешивания

* Новые наименования стоматологических материалов.
Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Fluor*/ Фтор-Люкс
ЛАК ФТОРИРУЮЩИЙ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Гиперчувствительность пришеечной зоны зуба
- › Гиперестезия препарированного под коронку «живого» зуба
- › Чувствительность зубов после реставрации, препарирования, снятия зубных отложений, полировки эмали или отбеливания зубов
- › Кариес зубов в стадии белого пятна
- › Профилактика кариеса молочных зубов, зубов «мудрости»
- › Защита фиссур в период их развития

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Быстрое образование фторирующей плёнки мгновенно снижает болевые ощущения у пациента
- › Уникальное сочетание аминфторида, фторидов кальция и натрия ускоряет реминерализацию и укрепляет эмаль
- › Высокая концентрация фторид-ионов обеспечивает пролонгированное действие

ФОРМА ВЫПУСКА: • флакон (13 мл)

SM Fluor*/ Фтор-Люкс
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФТОРИРОВАНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Профилактика кариеса молочных и постоянных зубов
- › Профилактика кариозных поражений эмали в области несъёмных ортодонтических конструкций (брекетов)
- › Реминерализующая терапия при кариесе зубов в стадии меловидного пятна
- › Устранение гиперестезии твёрдых тканей зубов, в том числе после проведения профессиональной чистки зубов
- › Обработка твёрдых тканей зубов при лечении пародонтита и пародонтоза
- › Обработка глубоких кариозных полостей перед реставрацией зубов композитными материалами

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › За счет особого механизма взаимодействия компонентов материала образование микрокристаллов фтористого кальция, магния и меди происходит непосредственно в самом дефекте, поэтому они не счищаются зубной щёткой
- › Высокое содержание микрокристаллов фторидов в дефекте обеспечивает пролонгированный эффект
- › Для достижения эффекта глубокого фторирования достаточно одной процедуры
- › Оптимальное соотношение компонентов в жидкости и суспензии позволяет проводить глубокое фторирование и эмали, и дентина в отличие от импортных аналогов, где для глубокого фторирования эмали и дентина применяется два разных материала

ФОРМА ВЫПУСКА: • жидкость (10 мл), суспензия (10 мл)

FlowStream Comfort, FlowStream
ПОРОШОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

FlowStream Comfort:

- › комфортное удаление наддесневой биоплёнки, плотного пигментированного налёта и пятен, а также слабоминерализованных зубных отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня
- › очистка фиссур перед герметизацией и щадящая обработка эмали, не приводящие к гиперестезии зубов

FlowStream:

- › Удаление налёта и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов
- › Очистка фиссур перед герметизацией
- › Удаление пигментаций, налёта курильщика
- › Щадящее механическое отбеливание эмали

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Щадящее удаление налёта, мягких зубных отложений, пигментаций, отбеливание зубов
- › Не приводит к гиперестезии зубов
- › Порошок состоит из сферических частиц, «выметающих» из дефекта, и абразивных частиц колотой формы, очищающих поверхность твёрдых тканей

6 ВКУСОВ:
экзотик, апельсин, лимон, вишня, кола, нейтральный

ФОРМЫ ВЫПУСКА: • порошок 40 мкм (300 г)
• порошок 65 мкм (300 г)

* Новые наименования стоматологических материалов.
Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Shine №1
ПАСТА ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Размягчение и удаление зубного камня без повреждения эмали

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Быстрое размягчение и удаление зубного камня без повреждения эмали
- › Зелёный цвет пасты позволяет осуществлять визуальный контроль нанесения
- › Легко смывается водно-воздушной струей
- › Приятный освежающий вкус

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (3 мл)

SM Shine №2
ПАСТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭМАЛИ ПЕРЕД РЕСТАВРАЦИЕЙ, ОТБЕЛИВАНИЕМ ЗУБОВ И УДАЛЕНИЯ МЯГКОГО НАЛЁТА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Обработка эмали перед реставрацией или отбеливанием зубов, перед проведением герметизации фиссур, для удаления мягкого налёта, пелликулы, а также для профилактики кариеса (профессиональная чистка зубов)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Эффективная профессиональная щадящая чистка эмали
- › Качественное удаление мягкого налёта и пелликул в труднодоступных местах и фиссурах
- › Консистенция пасты предотвращает её разбрызгивание в процессе работы
- › Легко смывается водно-воздушной струей
- › Приятный освежающий вкус

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (3 мл)

SM Shine №3
ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ПЛОМБ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ И СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Окончательная обработка пломб из композитных и стеклоиономерных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Качественная обработка пломб без повреждения здоровых тканей зуба
- › Удобное нанесение
- › Отличная смываемость водой
- › Эффект «сухого» блеска

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (3 мл)

SM Etch*/ Травлин
ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Травление эмали и дентина, применяемое в технологии кислотного травления

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Контрастный цвет геля для контроля нанесения
- › Оптимальная консистенция для точечного нанесения
- › Быстрое удаление смазанного слоя
- › Легко и полностью смывается водно-воздушной струей
- › Простота в применении

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (5 мл), насадки сменные (3 шт.)

* Новые наименования стоматологических материалов.
Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.



 +7 (906) 600 59 01

 www.smdmt.com

 info@smdmt.com

 [smdmt_official](#)

 [smdmt_official](#)